


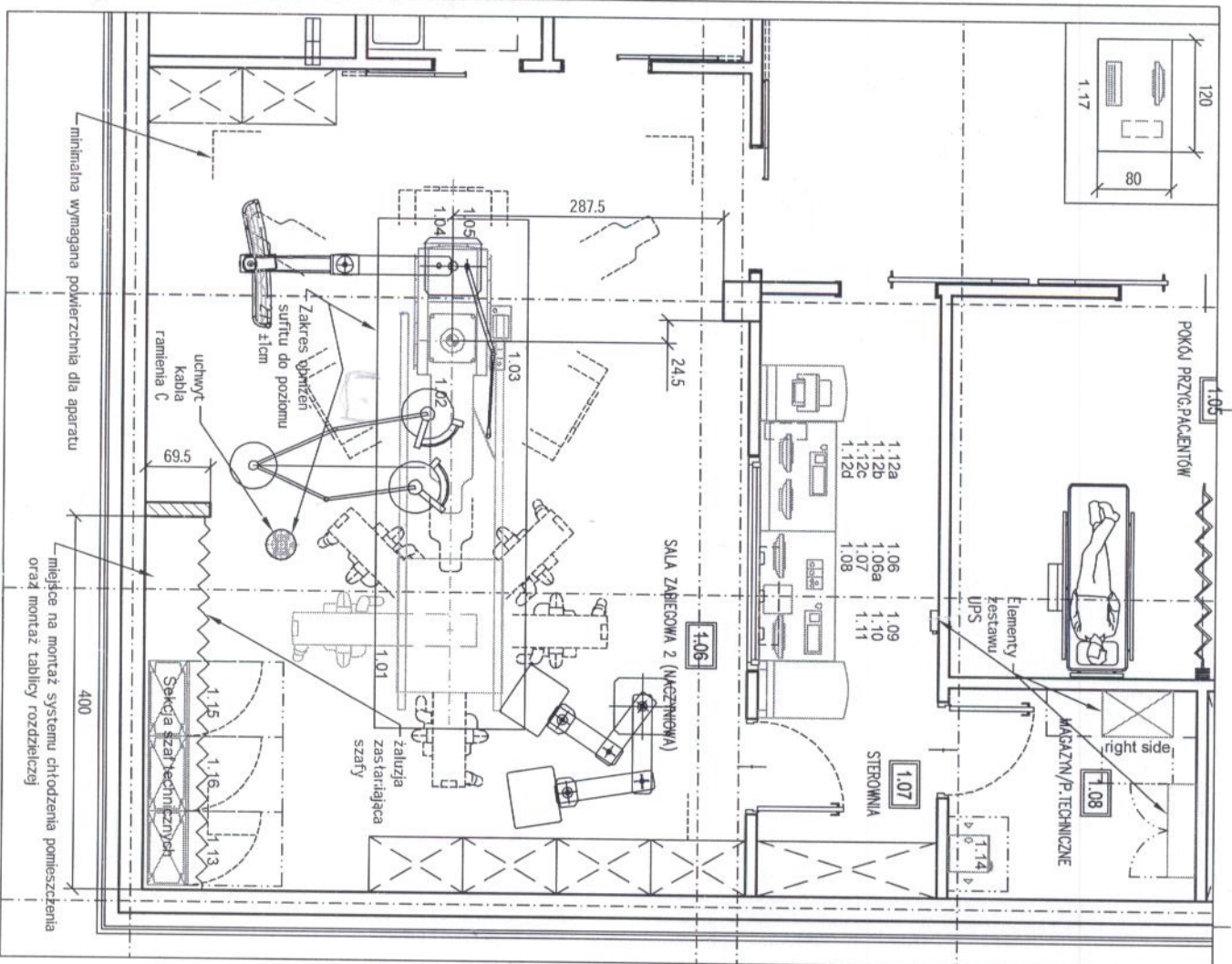


Maksymalny wydatek ciepła z UPSa przy maksymalnym obciążeniu wynosi 2.6 kW

Artis zee ceiling – Legenda

Poz	Opis	Masa (kg)	Ciepło wydzielane do powietrza (W)	Uwagi
1.01	Zawieszenie sufitowe ramienia C	904	200	
1.02	Stół pacjenta	482	200	
1.03	Konsola kontrolna i ECC i na stole pacjenta	4		
1.04	Monitory DCS 3 na zawieszaniu typu boom		225	
1.05	Oskona górnych części			
1.06	Blurko	60		
1.06a	Moduł kontroli			
1.07	Dyspozytor zasilania urządzeń w sterowni	29	100	
1.08	Monitor roboczy	10	75	
1.09	Monitor referencyjny	10	75	
1.10	System obrazowania AXIS	150	1270	
1.11	ACE	6		
1.12a	Axiom Sensis - Kontener komputerowy	75	1000	
1.12b	Axiom Sensis - Konsola kontrolna / Monitor / Klawiatura	15	150	
1.12c	Axiom Sensis - Drukarka	26		#5
1.12d	Axiom Sensis - UPS	14	200	
1.13	Generator POLYDOROS A100	300	1000	
1.14	Wymienik ciepła	42	4000	
1.15	Szafa systemowa	270	1600	
1.16	Szafa kablowa	120		optional
1.17	ACOM.PC			Na terenie jednostki
#5	Wydatek ciepła: druk 800 W, standby 17 W			

UWAGA:

Kształt kolumny anesteziologiczne, lampy bezcieniowej i zawieszania monitorów i osłony górnych części ciała ma charakter informacyjny i może odbiegać z rzeczywistego kształtu. Dokładną lokalizację ustalić z PM Siemens

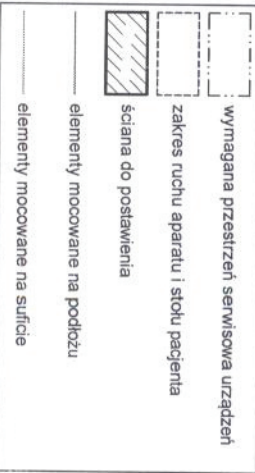

First creation	2015-09-08	Edited	Checked	Sign	Released	Sign
Editing progression						
S Healthcare Sector Szpital Specjalistyczny im. Szczeklika Tarnów						
ul. Żupnicka 11 03-821 Warszawa						
SIEMENS Healthcare sp. z o.o.						
Propozycja ustawienia aparatu Artis zee ceiling						
Drawing number	2015 195-WP-1276-p-01	File name	2015 195-WP-1276-p-01	Scale	1:50	Format A3
				0m 1m 2m		